

Handleiding Fecesonderzoek

Beste cliënt,

Bedankt voor de aanvraag van een microbiom onderzoek. Uw onderzoek zal worden uitgevoerd door onze partner BIOVIS Diagnostik.

In deze envelop vindt u de benodigdheden. Uw testset bevat:



- 1x stickervel met 16 barcode stickers, waarvan u er voor elk buisje 1 gebruikt
- 1x (soms 2) fecesbuisje(s) met geïntegreerd lepeltje
- 1x OmicSnap buisje met stabilisator vloeistof
- 1x fecesvanger
- 1x lekvrije sealbag met vliesdoekje
- 1x plastic retourenvelop met kartonnen binnenbescherming, voor gratis verzending (in Nederland)
- En deze handleiding

Symbolen toelichting:	
	Producent
	Distributie via
	In-vitro diagnostiek
	Bestellingsnummer
	Chargennummer
	Temperatuurbepijking
	Bruikbaar tot
	Niet hergebruiken
	Unique Device Identifier

Veiligheidsinstructies:

Drink de inhoud van het fecesbuisje niet op, vermijd direct contact met de vloeistof. Na huidcontact de aangetaste gebieden onmiddellijk grondig wassen. Buiten bereik van kinderen houden. Was/desinfecteer altijd de handen na afname van het fecesmonster. Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan Immundiagnostik AG en de nationale regelgevende instanties. Deze afnameset is vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met verordening (EU) 2017/746 (IVDR).

Vragen:

Mocht u vragen hebben dan kunt u die aan uw behandelaar stellen.

Ook kunt u kijken op www.microbiome-center.nl bij 'Veel gestelde vragen'.

Onze klantenservice kunt u bereiken d.m.v.:

- E-mail: Klantenservice@microbiome-center.nl
- Telefoon: 085-7603879
- WhatsApp: 06- 58 01 59 60

QR-code voor instructiefilm openen OmicSnap buisje:



Handleiding Fecesonderzoek

1. Kies de dag van uw monstername

Let op, u kunt uw fecesmonster alleen op de post doen op **maandag, dinsdag, woensdag of donderdag**.

2. Voorbereiding: eet zoals u gewend bent

Pas de dagen voorafgaand aan het onderzoek uw eetgewoonten niet aan!

3. Plaats de fecesvanger op de toiletbril

Of gebruik evt. een wegwerpbordje


Belangrijk: De feces mag niet in contact komen met de toiletpot of het water.



4. Monstername OmicSnap buisje

Belangrijk: De witte deksel moet gesloten blijven en mag niet geopend worden.
De gele deksel kan maar 1x geopend worden.

- Zet het fecesbuisje rechtop zodat de vloeistof niet kan uitlekken. Schroef de gele deksel van de fecesbuis tegen de klok in los en haal de monsterlans eruit.
- Prik met de monsterlans op minstens 4 plaatsen in de feces totdat het gaatje in de lans gevuld is. Schep geen feces met de lepel in de lans.
- Strijk overtollige feces van de voorkant van de monsterlans af.
- Plaats de monsterlans terug in het buisje en schroef de gele deksel dicht totdat er een weerstand ontstaat en het niet meer open kan.
- Zwenk het buisje vervolgens een paar keer heen en weer. Niet schudden a.u.b.

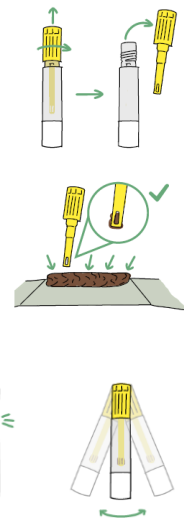

5. Monstername fecesbuisje

- Schroef het buisje met de bruine deksel open en neem met de geïntegreerde lepel op verschillende plekken feces af.
- Vul het fecesbuisje tot de aangegeven streep.
- Schrijf de datum van afname op de witte sticker van het fecesbuisje.



6. Barcodestickers


- Plak op elk buisje een barcode sticker. Een aanvraagformulier is **NIET** nodig.

Belangrijk: Bewaar de resterende barcode stickers voor het geval het lab vraagt om een nieuw buisje



7. Verzending

- Stop beide buisjes in het vliesdoekje en doe alles in de sealbag en plak deze dicht.
- Doe de sealbag in de plastic retour envelop en plak deze dicht.
- Doe de retour envelop nog dezelfde dag op de post.
- Voor het versturen vanuit Nederland is een postzegel niet nodig.

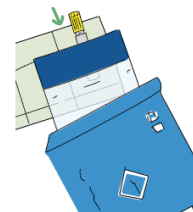

8. Uitslag

Na ong. twee weken is de rapportage beschikbaar. In uw account bij het Microbiome Center kunt u de voortgang van uw analyse volgen. U ontvangt een e-mail zodra de uitslag er is.